
PLASMART

Versatile™-PES PLAZMA FİLTRELER



- Olağanüstü fiber mekanik direnci sağlamak için optimize edilmiş çap ve duvar kalınlığı ile minimum alanda en yüksek filtreleme yüzeyi;
- Çok pürüzsüz iç membran yüzeyi, kan akımındaki kırmızı kan hücrelerine en az zararı garantiler ve hemoliz riskini en aza indirir.
- Membrandan geçen plazma proteinleri açısından yüksek bir ayrışma performansı (%90'dan fazla);

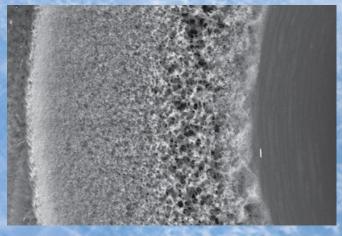

Versatile™-PES MEDICA S.p.A.'nın tescilli markasıdır.

• Önemli bir TMP değeri kullanma imkanıyla sonuçlanan optimize edilmiş bir membran kesiti: Medica herhangi bir hemoliz riski olmadan maksimum 100 mmHg TMP'yi garanti eder.

| | | | | | | A REPORT OF THE PARTY OF THE PA | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| | Plasmart 50 | Plasmart 100 | Plasmart 200 | Plasmart 400 | Plasmart 600 | Plasmart 700 | Plasmart 1000 |
| Boş fiber materyal | Versatile™-PES (polyethersulfone) | | | | | | |
| Membran alanı (m²) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 1.0 |
| Fiber iç çapı (µm) | 300 | | | | | | |
| Fiber dış çapı (µm) | 470 | | | | | | |
| Fiber duvar kalınlığı (µm) | 85 | | | | | | |
| Fiber uzunluğu (mm) | 127 | 140 | 140 | 140 | 225 | 225 | 280 |
| Filtre yuvası iç çapı (mm) | 14 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 43 |
| Prime kan hacmi (ml) | 3.9 | 8.6 | 13.2 | 30.5 | 48.5 | 56.6 | 78.3 |
| Maks. TMP (mmHg) | 100 | | | | | | |
| Maks. kan akışı (ml/min) | 20 | 40 | 60 | 140 | 240 | 280 | 390 |
| Plazma akışı | Önerilen %10-20 kan akışı, %30'u geçmeyin * | | | | | | |
| Kutulama bileşeni | Poliüretan | | | | | | |
| Kartuş yuvası materyali | Kopolyester BPA SIZ veya Polikarbonat (PC) | | | | | | |
| Kartuş kan giriş yeri materyali | Kopolyester BPA SIZ veya Polikarbonat (PC) | | | | | | |
| Kartuş kan bağlantıları | MLL Dönerli Kilit | | | | | | |
| Kartuş filtre /diyaliz bağlantıları | Dişi luer kilidi Ha | | | | | | Hansen |
| Birim (mm) Uzunluğu | 150 | 180 | 180 | 180 | 265 | 265 | 325 |
| Sterilizasyon Yöntemi | ETO veya Beta İşınları | | | | | | |
| Ürün Kodu ETO Steril | M03863 | M03864 | M03865 | M03866 | M03867 | M90018 | M03868 |
| Ürün Kodu Steril Beta Işınları | M03857 | M03858 | M03859 | M03860 | M03861 | M90017 | M03862 |
| Paketleme | Tek | | | | | | |

^{*} Sığır kanı ile test edilmiştir% 35 Hct, 60g / I Toplam Protein



Dateks Teknik Sistemler A.Ş.

Yaşamkent Mah. 3061 Cad. No:38 Çankaya-ANKARA Tel:+90 312 212 70 97 Fax:+90 312 212 07 82 dateks@dateks.com www.dateks.com.tr

WEDICA

MEDICA S.p.A. Via degli Artigiani, 7 41036, Medolla (Modena)

Telefon +39 0535 51159 Faks + 39 0535 52605 info@medica.it www.medica.it

